

Reinigung von HdO-Geräten




mit dem Reinigungstuch

Die tägliche Reinigung Ihres Hörgerätes ist ganz einfach und wird Ihnen mit ein wenig Übung schnell von der Hand gehen. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit in die Mikrofon- und Schallaustrittsöffnungen dringt.


Trocknen Sie das Gerät anschließend, wie auf Seite 12 beschrieben.

Und so reinigen Sie richtig:

- 1 Trennen Sie durch kräftiges Ziehen den Schallschlauch vom HdO-Gerät.

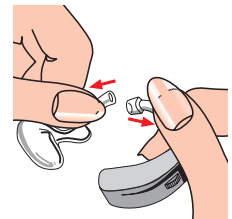

- 2 Zur mühelosen Reinigung Ihres HdO-Gerätes nehmen Sie ein feuchtes HADEO-Reinigungstuch und reiben das Hörgerät damit ab.

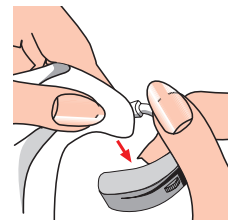


Hörgeräte bestehen aus vielen Kleinstbauteilen und einer empfindlichen Elektronik. Um die volle Funktionsfähigkeit Ihres Hörgerätes sicherzustellen und Beschädigungen vorzubeugen, ist es wichtig zu wissen, wie Sie Ihre Hörgeräte richtig reinigen und pflegen.

Reinigung von HdO Ohrstücken


mit Reinigungstabletten/ -flüssigkeit



- 1 Trennen Sie durch kräftiges Ziehen den Schallschlauch vom HdO-Gerät.

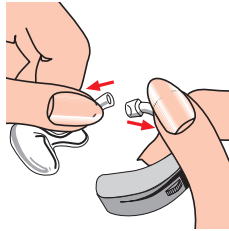

- 2 Nehmen Sie das Sieb aus der Reinigungsdose.

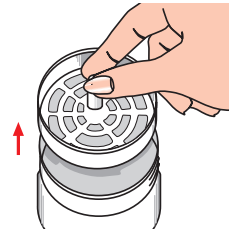

Reinigung mit
Reinigungstabletten




- 3 Eine Reinigungstablette in die $\frac{3}{4}$ voll mit Wasser gefüllte Reinigungsdose legen. Schon ist Ihre Reinigungsflüssigkeit fertig.

Reinigung mit
Reinigungsflüssigkeit




Füllen Sie die Dose $\frac{3}{4}$ voll mit Reinigungsflüssigkeit. Oder füllen Sie die Dose mit 1cm Reinigungsflüssigkeits-Konzentrat und anschließend mit Wasser $\frac{3}{4}$ voll auf.


- 4 Legen Sie das Ohrstück mit dem Schallschlauch (auf keinen Fall mit Hörgerät!) auf das Sieb und tauchen Sie beides in die Reinigungsflüssigkeit. Mindestens 20-30 Min. oder über Nacht reinigen lassen.

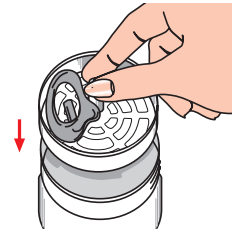

- 5 Nehmen Sie das Sieb aus der Dose heraus - Ohrstück mit Wasser abspülen und abtrocknen.

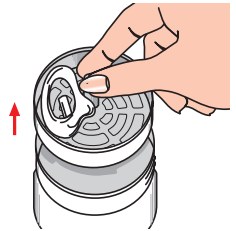

- 6 Den HADEO-Airball fest in den Schallschlauch stecken und kräftig drücken - Flüssigkeitsreste werden aus dem Schallschlauch und dem Ohrstück entfernt.

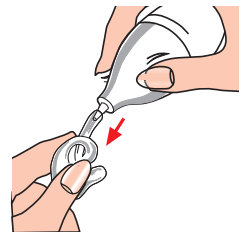


Aus hygienischen Gründen sollte die Reinigungsflüssigkeit spätestens nach 1 Woche gewechselt werden.


Trocknen von HdO-Geräten und Ohrstücken

mit Trockenkapseln u. -beutel


- 1 Nehmen Sie eine HADEO-Trockenkapsel aus der Verpackung. (Die Trockenkapsel nicht öffnen!)

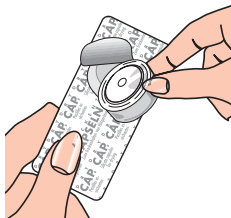

- 2 Öffnen Sie das Batteriefach Ihres HdO-Gerätes und entnehmen Sie die Batterie.

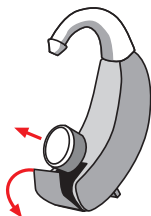


- 3 Legen Sie nun das Ohrstück, das Hörgerät und die Trockenkapsel in den Trockenbeutel. Schließen Sie ihn nach der folgenden Anleitung.

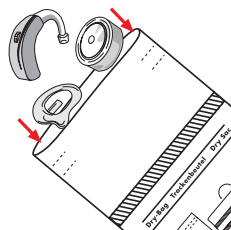

Einmal pro Woche über Nacht durchführen, bei hoher Feuchtigkeit täglich.

Schließen des Trockenbeutels:


- 4 Legen Sie den Beutel vor sich hin, so dass die Zeichnung zu Ihnen zeigt. Streichen Sie die Luft aus dem Beutel heraus.

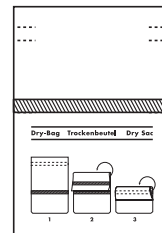

- 5 Schlagen Sie nun die obere Kante einmal nach vorne über, so dass beide Klettverschlüsse nach vorne zeigen.



- 6 Nehmen Sie die obere Kante und schlagen Sie diese noch einmal nach vorne über, so dass beide Klettverschlüsse aufeinander liegen. Drücken Sie den Klettverschluss gut zu.

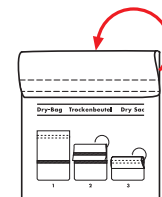

Den Beutel samt Trockenkapsel nach jeder Anwendung bitte gut verschließen. Färbt sich die Kapsel rosa bzw. weiß, tauschen Sie die Kapsel gegen eine neue blaue bzw. orangefarbene Trockenkapsel aus.


Reinigung von IO-Geräten

mit Reinigungstüchern

Für die Reinigung und Pflege Ihres IO-Gerätes gilt das gleiche wie für HdO-Geräte. Reinigen Sie auch Ihr IO-Hörgerät täglich und achten Sie streng darauf, dass keine Flüssigkeit in die Geräteöffnungen dringt. Versuchen Sie auch bitte nicht, mit einem Gegenstand in Einbuchtungen oder Öffnungen einzudringen!

Reinigen Sie Ihr IO-Gerät so:

- 1 Nehmen Sie sich ein feuchtes HADEO-Reinigungstuch und reiben Sie Ihr IO-Gerät damit ab. So wird Ohrschmalz mühelos entfernt und Ihr Gerät hygienisch sauber.

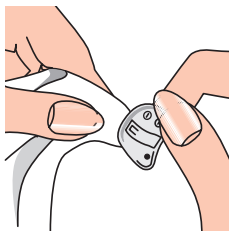

Damit Ihr Gerät nicht durch Feuchtigkeit beschädigt wird, trocknen Sie es regelmäßig im HADEO-Trockenbeutel zusammen mit einer Trockenkapsel. Der Vorgang wird auf den Seiten 16-17 genauer erläutert.


Reinigung von IO-Geräten

mit Reinigungsspray


Sie können Ihr Hörgerät auch mit Reinigungsspray säubern. Achten Sie dabei besonders darauf, dass Sie keine Flüssigkeit in Öffnungen oder Einbuchtungen verteilen.

Reinigen Sie Ihr IO-Gerät bitte folgendermaßen:

- 1 Sprühknopf der Sprayflasche drücken bis der Pinsel benetzt ist. Das IO-Gerät mit leicht kreisenden Bewegungen reinigen.

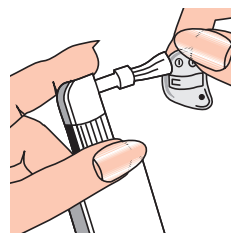

- 2 Reiben Sie Ihr IO-Gerät anschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Am nächsten Morgen entfernen Sie mit dem Pinsel eventuelle Ohrschmalzreste.

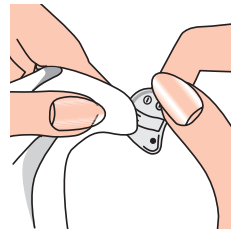


Sie sollten Ihr IO-Gerät regelmäßig in dem HADEO-Trockenbeutel trocknen, wie es auf den folgenden beiden Seiten beschrieben wird.

Trocknen von IO-Geräten


mit Trockenkapseln u. -beutel

Schließen des Trockenbeutels:


- 1 Nehmen Sie eine HADEO-Trockenkapsel aus der Verpackung. (Die Trockenkapsel nicht öffnen!)

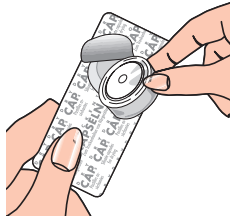


- 2 Öffnen Sie das Batteriefach Ihres IO-Gerätes und entnehmen Sie die Batterie.

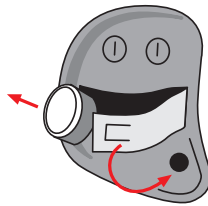


- 3 Legen Sie nun das Hörgerät und die Trockenkapsel in den Trockenbeutel. Schließen Sie ihn entsprechend der folgenden Anleitung.

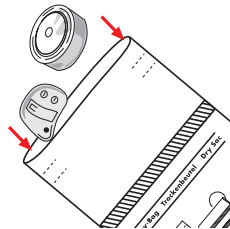

- 4 Legen Sie den Beutel vor sich hin, so dass die Zeichnung zu Ihnen zeigt. Streichen Sie die Luft aus dem Beutel heraus.

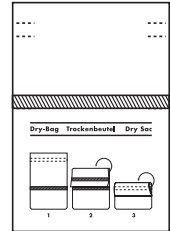

- 5 Schlagen Sie nun die obere Kante einmal nach vorne über, so dass beide Klettverschlüsse nach vorne zeigen.

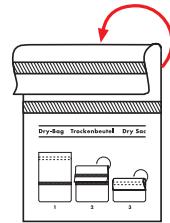

- 6 Nehmen Sie die obere Kante und schlagen Sie diese noch einmal nach vorne über, so dass beide Klettverschlüsse aufeinander liegen. Drücken Sie den Klettverschluss gut zu.



Einmal wöchentlich über Nacht durchführen, bei hoher Feuchtigkeit täglich.

Den Beutel samt Trockenkapsel nach jeder Anwendung bitte gut verschließen. Färbt sich die Kapsel rosa bzw. weiß, tauschen Sie die Kapsel gegen eine neue blaue bzw. orangefarbene aus.